

NOUVELLE allure ! Même fonctionnalité !



Fauteuil inclinable à allongement Elite 785
avec NOUVELLE option de structure noire
et rembourrage gris météore

La solution idéale pour le confort en position assise et allongée

Ajustable à toutes positions :


Le siège s'incline jusqu'à 40°

Le dossier s'allonge jusqu'à 90°

Répartition uniforme de la pression grâce au Comfort Tension Seating[®]

Accroît la sécurité, facilite les interventions et contribue à améliorer la qualité de vie

Broda Comfort Tension Seating[®]

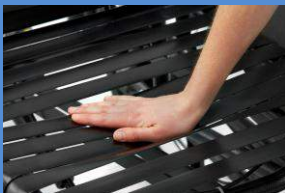

- Aide à prévenir le cisaillement de la peau
- Procure un confort accru en position assise prolongée



40° d'inclinaison du siège



90° d'allongement du dossier

La solution idéale pour vos besoins de positionnement et de réduction de pression !



Illustré avec des accoudoirs à profondeur réglable facultatifs

- Le fait qu'il s'incline et s'allonge à toutes positions contribue à **prévenir l'affaissement, le glissement et la chute sans devoir recourir à des contentions.**
- Le fauteuil Broda Comfort Tension Seating^{MC} contribue à **prévenir la détérioration de la peau.**
- S'intègre au **programme PDSB** (Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires).
- Constitue la solution de positionnement pour vos résidents, même les plus **difficiles à asseoir**. Idéal pour **l'agitation chronique et les mouvements involontaires.**
- **Augmente l'interaction** avec les autres résidents et le personnel, **améliorant ainsi la qualité de vie.**
- **Réduit le temps consacré et les efforts déployés** par les intervenants.

Son armature extrêmement durable et stable **augmente la sécurité des résidents** tout en **réduisant l'entretien du fauteuil et en augmentant la longévité de ses composantes.**

Les fauteuils Broda offrent un maximum de polyvalence pour vous aider à satisfaire vos besoins



Fauteuil inclinable à position allongée 785

*Jusqu'à 38° d'inclinaison du siège et 90° d'allongement du dossier
Se met en position de Trendelenburg
Option de semi-allongement disponible*

- Son allongement complet et ses accoudoirs amovibles facilitent les transferts latéraux et le remplacement des produits d'incontinence.
- Les résidents peuvent dormir dans le fauteuil, ce qui signifie moins de transferts

NOUVELLE option !



Accoudoirs fixés au siège (les accoudoirs s'inclinent avec le siège)

Fauteuil inclinable 85V

Jusqu'à 38° d'inclinaison du siège

- Exceptionnel pour les résidents qui ont tendance à se pencher ou glisser, mais qui ne nécessitent pas d'être allongés.
- La caractéristique d'inclinaison seulement permet de maintenir les hanches des résidents à angle fixe, ce qui convient parfaitement aux contractures de hanches



Les accoudoirs fixes et inclinables sont interchangeables pour satisfaire la plupart des options de positionnement

Caractéristiques standard

- S'incline et s'allonge à toutes positions (inclinaison seulement pour le modèle 85V)
- Broda Comfort Tension Seating^{MC}
- Roues arrière de 6", pivotantes; roues avant de 5", autobloquantes à toutes positions
- Butées latérales supérieures amovibles
- Accoudoirs à hauteur réglable
- Panneaux latéraux relevables et amovibles
- Repose-pieds repliables en deux sections
- Repose-jambes éleveur à longueur réglable (sur le modèle 785, le repose-jambes s'articule et s'étend en position allongée)

- Largeur du siège : 18 ou 20"
- Profondeur du siège : 17"
- Hauteur du siège : 20,5"
- Longueur du dossier : 32"
- Entièrement coussiné (réglable et amovible), incluant appui-tête, coussins pour épaules, coussins latéraux inférieurs et supérieurs, coussins de mollets et de repose-pieds, housses en ratine de coton pour siège et dossier, housses supplémentaires en ratine
- Structure tubulaire durable en acier de calibre 16
- Choix d'accoudoirs fixés au siège ou à la base

Options du fauteuil Elite



785 complètement recouvert de vinyle avec roues en alliage léger



785 avec ensemble de coussins pour la paraplégie spastique (HSP) et poteau pour soluté

Options additionnelles du fauteuil Elite

- Table pour repas
- Couvre-table coussiné
- Demi-table
- Accoudoirs coussinés
- Support à oxygène
- Ceinture abducteur coussinée
- Butées de tronc latérales
- Coussins de tête moulants
- Coussins de siège et dossier en vinyle
- Coussins de siège et dossier en vinyle intégral (contour)
- Chariot pour aérateur
- Ensemble pour paraplégie spastique (HSP)
- Base allongée (785)
- Roues en alliage léger : 20 ou 24"


Dimensions sur mesure et pour personnes obèses disponibles :

Largeurs du siège : 16, 22, 24, 26 ou 28"
 Profondeurs du siège : 15,5, 18,5 ou 20"
 Hauteurs du siège : 19, 22 ou 23,5"
 Longueurs du dossier : 33,5, 35, 36, 38 ou 40"

Pour toutes autres dimensions sur mesure, communiquer avec le fabricant.



Accoudoirs à profondeur réglable
 Excellent pour les options de positionnement

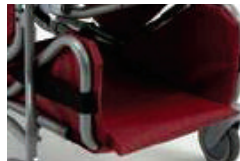

Toile pour contractures
 Convient aux contractures de genoux

Broda Comfort Tension Seating^{MC}



- Une formule brevetée permet aux courroies de se mouler au corps afin d'offrir un meilleur soutien et un confort prolongé en position assise.
- Les courroies répartissent la pression, contribuant ainsi à réduire la détérioration de la peau.
- L'espace entre les courroies laisse passer l'air, contribuant à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité qui peut provoquer la détérioration de la peau.



La mémoire des courroies leur permet de reprendre leur forme d'origine en quelques secondes.

Emplacement pour carte d'affaires