

SeCure^{MD}

*Une protection
discrète pour des
années durant!*

- Réduit les pressions pour un meilleur confort et prévient les plaies de pression
- Supports latéraux très fermes aident à prévenir les risques de chutes et l'utilisation de ridelles de lit.

REVÊTEMENT DE SURFACE EN STRATOS

imperméable qui peut facilement être nettoyé.
Le matériel Stratos est la meilleure protection sur le marché contre le MVT.

COUSSINAGE DU DESSUS MOELLEUX

élimine le besoin d'ajout d'accessoires supplémentaires.

SUPPORTS LATÉRAUX ÉLEVÉS


pour rappeler au patient de s'éloigner de la bordure du lit.

SORTIES CENTRALES SPÉCIALES

permettent un transfert facile, sécuritaire et sûr.

POLYMÈRE DE GRANDE QUALITÉ

procure des années de confort et de support.

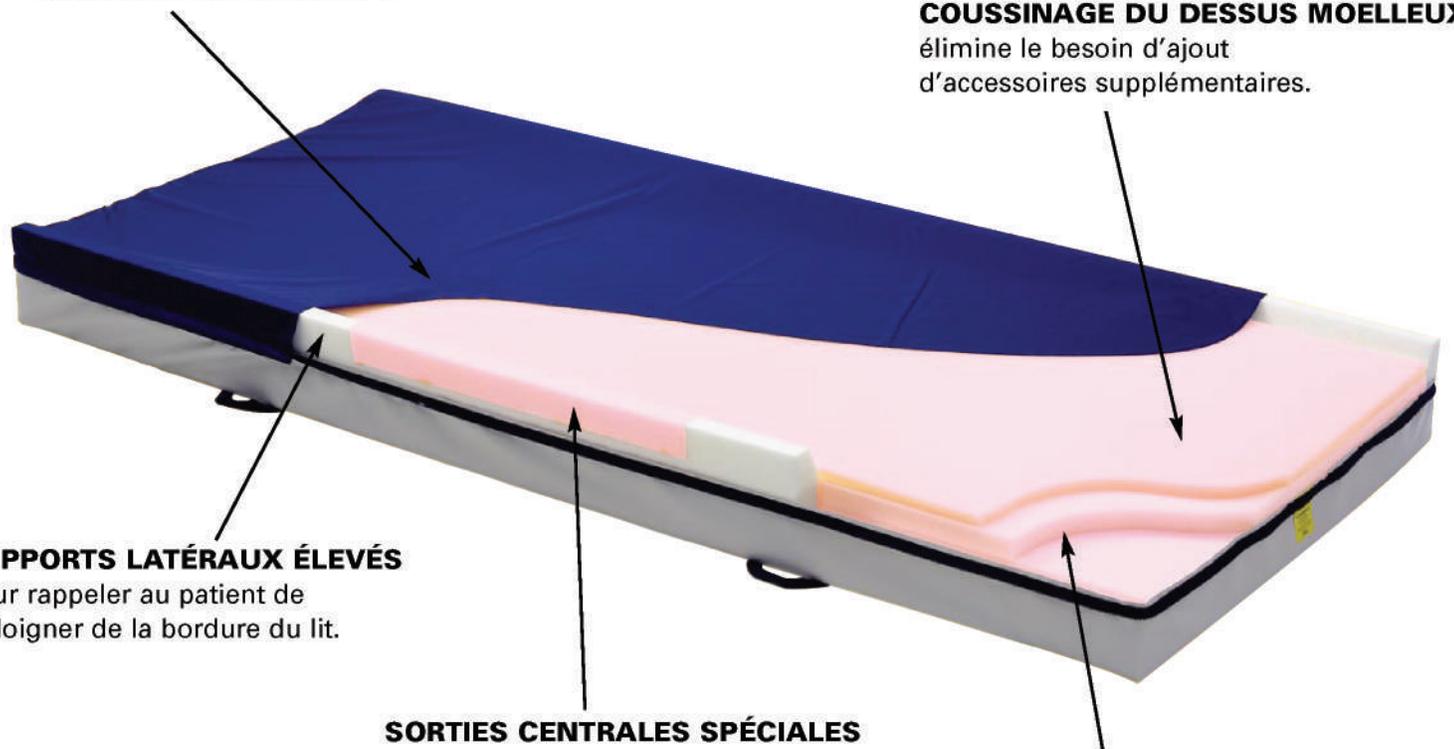

Manufacturé par
COMFORTEX
www.comfortexinc.com

Distribution exclusive au Canada par



Tél. : (514) 990-5196 1-888-990-5196 Fax. : (514)879-3496

Matériaux internes : Polymère manufacturé

- Partie supérieure : 1 pouce 7 I.L.D. 1.25 pouces 11 I.L.D.
 - Partie inférieure : 3.5 pouces 40 I.L.D.
 - Supports latéraux : Ultra-ferme, haute-densité, 60 I.L.D., Section centrale de sortie 11 I.L.D.
- Les côtés renforcis aident à prévenir les chutes.

I.L.D. (Indentation Load Deflection) reflète la fermeté. Plus le chiffre est grand, plus le polymère est ferme.

POLYMÈRE MANUFACTURÉ : Ce matériau peut être manufacturé en plusieurs degrés de fermeté (I.L.D.) et lorsque combinés ensemble, procurent un confort extraordinaire en plus de réduire les pressions. Les polymères manufacturés gardent leurs propriétés de support de 3 à 4 fois plus longtemps que la mousse conventionnelle.

- **Garantie** : 7 ans

Les matériaux ne contiennent pas de Chlorofluorocarbones.

Aucune présence de latex. Rencontre ou excède les normes californiennes d'incendie #117 & NFPA 101 Code de Vie Sécuritaire, Chapitre 31

Les housses de recouvrement :

Housse du dessus :

Matériel STRATOS (en attente de brevet)

- Aucune matière plastique
- Housse pouvant être changée facilement avec la fermeture éclair
- Antibactérien
- Bleu marine
- Rencontre les normes d'incendie DOC FF-4-72
- **MVT** : 1.63 gms/hr/m²

MVT (Moisture Vapor Transmission) correspond au passage des molécules de vapeur d'eau au travers des pores d'un matériau perméable ou semi-perméable. Les matelas recouverts de tissus ayant un MVT très bas sont mieux protégés contre les infiltrations d'humidité.

- **Garantie**: 7 ans

La housse de surface doit être changée à cette période pour éviter d'endommager la partie centrale de votre matelas, ce qui aurait pour effet d'annuler votre garantie.

Housse de fond :

- Herculex, vinyle de polyester renforcé.
- Traitée pour se conformer ou excéder le bulletin d'incendie Californien #117.
- Antibactérien
- Bleu indigo
- **Garantie** : 7 ans

Poignées : 4 poignées de transport

Hauteur : 6.5 pouces

Poids : 8.16 kilos (18 livres)