

Moniteur de mobilité



Apportez une nouvelle dimension à votre programme de prévention des chutes avec les moniteurs de mobilité TABS™

Les moniteurs TABS™ sont l'outil indispensable pour le personnel soignant responsable de patients ou de résidents ayant un risque de chutes ou d'errance.

Le moniteur de mobilité est un appareil médical sans contrainte corporelle qui :

- vous prévient lorsqu'un résident ou un patient tente de quitter son lit, une chaise, un fauteuil roulant ou une pièce;
- peut être éducatif pour des résidents ou des patients, en leur rappelant d'appeler pour de l'aide avant de se lever grâce à l'utilisation d'un message que vous pouvez personnaliser;
- réduit les risques de chutes;
- permet de réduire le temps d'intervention.



TABS Voice +™

Avec un simple système de disque, clip et cordelette, les moniteurs de mobilité TABS™ vous permettent de déterminer une zone personnelle de sécurité pour chaque résident et de vous alerter lorsque le résident quitte cette zone.



TABS Select™

Les moniteurs TABS™ vous sont offerts en trois versions :

Avec **le moniteur TABS Voice +™** vous pouvez :

- Facilement enregistrer un message personnalisé pour rassurer le patient que de l'aide est en chemin ou tout simplement pour lui rappeler d'utiliser sa marchette, activer les freins à son fauteuil roulant, etc.
- Choisir une des quatre tonalités pour mieux identifier lequel de vos résidents a besoin d'assistance ou identifier une aile de votre établissement avec des tonalités différentes;
- Éviter les bruits inutiles. Avec l'interface au système d'appel, vous pouvez programmer l'alarme pour qu'elle ne retentisse qu'au poste de garde ou aux deux endroits simultanément.



TABS Basic™

Avec **le moniteur TABS Select™** vous pouvez :

- Choisir une des quatre tonalités;
- Utiliser seulement l'interface au système d'appel.

Avec **le moniteur TABS Basic™** :

- Vous n'avez qu'une alarme.

Polyvalents, les moniteurs TABS™ s'emboîtent dans une console murale facile à installer avec des vis ou du ruban adhésif Dual Lock. Le transfert entre le lit, une chaise, un fauteuil roulant et une pièce est facile à l'aide de l'utilisation de plusieurs consoles murales. Les moniteurs TABS™ sont alimentés par une pile alcaline de 9 volts. Une alarme retentit pour vous alerter lorsque la pile doit être changée.

Qui devrait utiliser un moniteur TABS™?

- Les personnes qui ne devraient pas être hors du lit, d'une chaise ou d'un fauteuil roulant;
- Les personnes qui sont désorientées et ont tendance à fuguer;
- Les personnes qui sont à risque de tomber;
- Les personnes qui ont besoin d'être rappelées d'attendre jusqu'à ce que l'on vienne les aider.


	Nombre d'alarme de différentes tonalités	Utiliser avec l'interface du système d'appel	Possibilité d'enregistrer un message personnalisé
TABS Voice +™	4	● ●	●
TABS Select™	4	●	●
TABS Basic™	1		

ACCESSOIRES



Longueurs de cordelettes optionnelles

Les moniteurs TABS™ sont envoyés avec une cordelette de 76 cm. La cordelette doit cependant être assez longue pour autoriser un mouvement dans la zone de sécurité prédéterminée par les soignants, mais également assez courte pour assurer que l'alarme est déclenchée lorsque le résident se déplace en dehors de cette zone de sécurité. Disponibles en 38 cm, 46 cm, 61 cm, 76 cm, 91 cm ou 106 cm. Pour des besoins particuliers, des longueurs sur mesure sont disponibles.

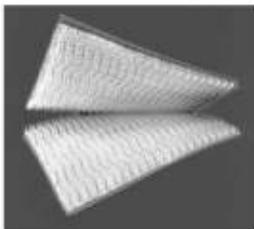

Ruban Adhésif Dual Lock (installation supplémentaire)

Sur des surfaces où le montage plus permanent à l'aide de vis, n'est pas approprié, utilisez du ruban adhésif Dual Lock (pour installer votre moniteur TABS™).



Console pour fauteuil roulant

La console de montage pour fauteuil roulant du moniteur de mobilité TABS™ augmente les possibilités de votre moniteur TABS™. En utilisant un tendeur, la console de montage pour fauteuil roulant s'installe en quelques secondes sans vis ou rivets.



Ensemble de montage pour porte

Si le résident ou le patient sous vos soins a tendance à fuguer et vous désirez contrôler l'accès ou la sortie d'une chambre, utilisez l'ensemble de montage pour porte pour surveiller des portes intérieures. (Les moniteurs TABS™ ne sont pas conçus pour être utilisés sur des portes extérieures). Un disque, une corde et un clip assemblé spécialement, permet d'ouvrir la porte d'environ 10 cm, mais pas suffisant pour laisser le patient ou le résident sortir de la zone sans être remarqué.



Consoles Murales Supplémentaires

Pour obtenir le maximum de votre moniteur de mobilité TABS™, installez des consoles murales partout où un résident ou un patient doit être surveillé.

Les moniteurs TABS™ sont une marque déposée de Senior Technologies distribués par :



Succ. Place du Commerce
C.P. 4, Brossard, Québec
J4W 3L5

Tél. : 514-990-5196
Sans frais : 1-888-990-5196
Télec. : 514-879-3496